

„Dans un environnement
professionnel
les lits médicalisés
doivent faire leurs
preuves chaque jour.“

practico 25|80 plus

.bock[®] ///





Notre gamme de couleurs pour votre maison:
ci-contre une version en chêne Sonoma



Confort et sécurité : grandes roulettes doubles avec verrouillage central et dispositif directionnel, en option également avec un revêtement des roulettes en aluminium

Le lit qui se distingue en termes de flexibilité : le practico 25|80 plus de bock

Avec le practico 25|80 plus, le spécialiste des solutions flexibles bock, met en avant le segment des lits médicalisés. Le practico 25|80 plus, avec son plan de couchage confortable à 4 sections et relève-buste à translation, offre au résident une variété de positions de couchage ergonomiques, confortables et physiologiques. Pour un soin optimal et un couchage sûr, le lit est réglable en hauteur de 25 à 80 cm et peut être réglé facilement grâce à la télécommande clairement agencée.

Plus de confort

Un avantage de flexibilité extraordinaire est présenté par la rallonge de lit intégrée (avec SR3). Elle permet de procéder à des ajustements individuels en un rien de temps, ainsi que l'extension des barrières à 210 ou 220 cm de longueur sans aucun élément supplémentaire. L'économie et la fonctionnalité vont de pair - même dans le détail. De plus une large gamme d'accessoires et d'équipements supplémentaires, tels que des lampes et un tiroir de literie pratique, sont à votre disposition.



Plus de confort et de soutien pour les soins grâce au panneau bas au pied du lit.


Ergonomie optimisée : le plan de couchage

Avec son plan de couchage, le lit practico 25|80 plus répond à une exigence de qualité clairement définie pour les soins en institutions : un couchage confortable et ergonomiquement optimisé.

- ⊕ Le plan de couchage en 4 parties offre un relèvement de buste à translation ergonomique qui assure une position assise confortable et physiologiquement raisonnable et réduit les pics de pression. La compensation de la longueur du relèvement de buste est de 11 cm (relèvement de buste à translation)
- ⊕ Différents réglages de siège et de couchage ainsi que différents systèmes de plans de couchage offrent un confort individualisé
- ⊕ La rallonge de lit et de barrière de lit intégrée (avec SR3) permet une adaptation rapide et facile à la taille du résident sans aucun outil.
- ⊕ Tête extrêmement stable, également adaptée à un usage intensif
- ⊕ Multiples positions telles que Trendelenburg, Anti-Trendelenburg et position d'assise confortable ; ces trois dernières fonctions peuvent être sélectionnées à l'aide d'un seul bouton



Plan de couchage réglable

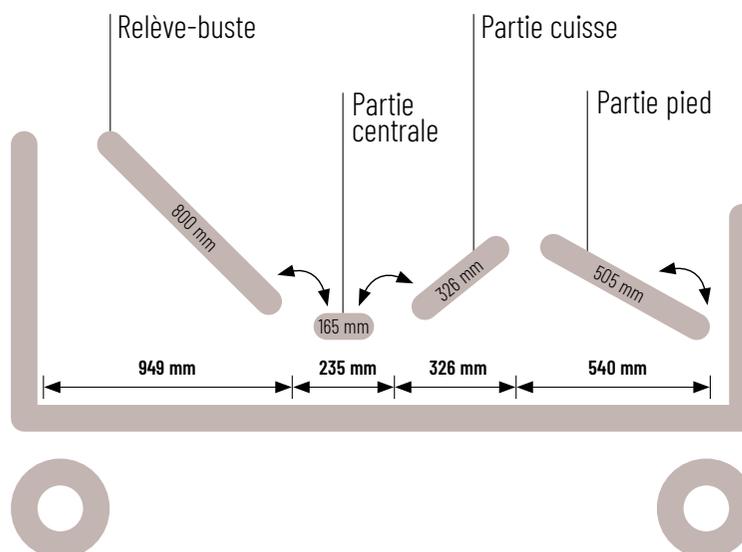


practico 25|80 plus

Avantages pour le résident:

- ⊕ Relève-buste à translation assurant des positions confortables et physiologiques
- ⊕ Couchage en toute sécurité avec une hauteur basse de seulement 25 cm
- ⊕ Trois systèmes de sommier différents pour un confort de couchage individuel (p.7)
- ⊕ Plan de couchage avec multiples possibilités de réglage, entre autre la position d'assise confortable

Avantages pour le soignant:

- ⊕ Hauteur de travail optimale de 80 cm
- ⊕ Rallonge de lit intégrée, sans outils, à 210 ou 220 cm
- ⊕ Grandes roulettes doubles avec verrouillage central et dispositif directionnel pour faciliter les manoeuvres et l'arrêt

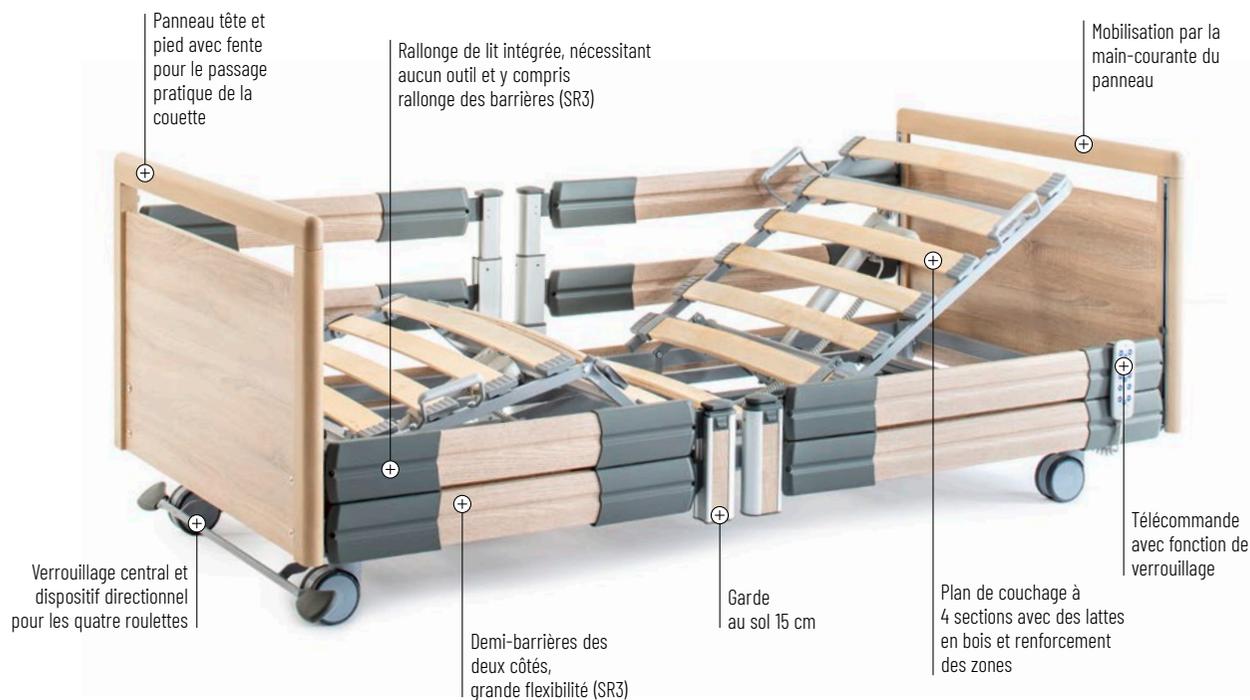

Plus d'informations
www.bock.net

practico 25 | 80 plus

Dimensions

Dimension extérieure	105 × 210 cm
Plan de couchage	90 × 200 cm
Dimensions spéciales	largeur 100, 105, 110 cm longueur 210 cm intégré jusqu'à 220 cm
Réglage de la hauteur	25 - 80 cm
Garde au sol	15 cm

Poids

Poids du lit	ca. 140 kg
Charge de travail sûre	220 kg
Poids max. de personne	185 kg

Barrières

Systèmes	SR1, SR2 ou SR3
Versions	barrières continues demi-barrières longues barrières section de tête sans barrières
Hauteur* :	
- Avec lattes en bois	39.5 cm
- Avec ripolux® neo	35 cm

Autres caractéristiques

Panneaux	I+, V+, VII+, VIII+
----------	---------------------

Moteurs

Protection contre les éclaboussures d'eau selon IPX4, câble spiralé de haute qualité avec protection anti-traction et anti-torsion, transformateur à fiche SMPS avec très basse tension offrant une haute sécurité à partir de la prise de courant, en option : abaissement d'urgence (CPR)

* Distance entre bord supérieur du plan de couchage et bord supérieur des barrières relevées de la SR3



Veillez trouver les spécifications de produit, les panneaux ainsi que les accessoires à partir de la page 10.

Tout compris : réduction des coûts grâce à la rallonge de lit intégrée*

Le practico 25|80 plus est équipé d'une rallonge de lit intégrée. Le plan de couchage peut être rallongé de 10 ou 20 cm, y compris les barrières. Les grands résidents apprécient en particulier le confort ergonomique et les soignants bénéficient d'un maximum de flexibilité grâce à la rallonge qui peut être sortie rapidement. Simplement rallonger - c'est tout.

- ⊕ La rallonge du plan de couchage présente un autre avantage pour le résident : l'élément de rallonge se déplace automatiquement lorsque la partie pied du plan de couchage est ajustée, afin que les jambes et les pieds restent confortables à tout moment.
- ⊕ En un tour de mains les soignants peuvent facilement adapter la longueur du lit aux différents profils de résidents et aux différentes situations de soins. Il n'est plus nécessaire de remplacer le lit et/ou les barrières latérales, ce qui serait coûteux et prendrait beaucoup de temps.

En option : le kit de rallonge qui peut être commandé si besoin. Un ensemble qui est composé de :

- ⊕ Élément de rallonge pour le plan de couchage
- ⊕ Deux pièces décoratives pour rallonger l'encadrement du lit

* pour SR3

Vis pour la rallonge de lit qui ne nécessite aucun outil supplémentaire

1 Desserrer les vis et retirer le panneau de pied - facile et sans effort.

2 Fixez les deux pièces décoratives de l'encadrement latéral et repoussez le panneau de pied à fleur devant l'encadrement.

3 Insérez l'élément de rallonge du plan de couchage - rapide et facile.

4 L'élément de rallonge se déplace automatiquement lorsque la partie pied du plan de couchage est ajustée.

5 Une rallonge de matelas arrondit le système d'une manière optimale.

6 En option : la rallonge de matelas peut être simplement omise pour une décompression des talons.

Configurable individuellement : plans de couchage selon les besoins



Lattes en bois avec renforcement des zones



La variante de base.

Les lattes en bois éprouvées avec renforcement des zones sont disponibles chez bock en tant qu'équipement standard. Le renforcement dans la zone d'assise assure un niveau de confort élevé, surtout en position assise. Les lattes sont fixées dans des supports en caoutchouc flexibles et durables. Cela permet un remplacement facile si nécessaire.

Avantages pour le résident :

- ⊕ Confortable et ergonomique

Avantages pour le soignant :

- ⊕ Facile à nettoyer et durable

Plan de couchage à lattes en aluminium



Avec lattes amovibles en aluminium.

Ce plan de couchage moderne permet une décompression rapide et individuelle grâce aux lattes amovibles en aluminium. Les lattes stables sont faciles à retirer, à nettoyer et à réinstaller. Le plan de couchage peut être converti à tout moment au système ripolux® neo en tournant les lattes et insérant les ressorts individuels.


Avantages pour le résident :

- ⊕ Lattes en aluminium amovibles garantissant une décompression individuelle à tout moment

Avantages pour le soignant :

- ⊕ Matériel extra-léger
- ⊕ Lattes d'aluminium robustes, durables et lavables

ripolux® neo

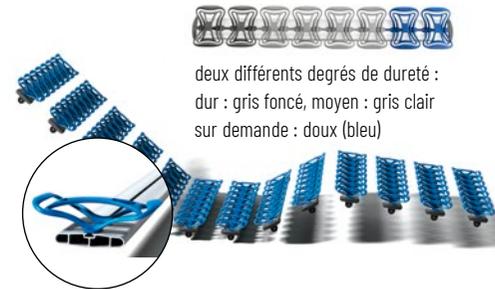

Un système de sommier à lattes - parfait pour tous.

Le système de sommier flexible ripolux® neo s'adapte précisément à la répartition de la pression du corps, pour un positionnement confortable et ergonomique dans toutes les positions assises et de couchage.

Avantages pour le résident :

- ⊕ Ressorts à deux différents degrés de dureté pour un confort de couchage individuel. Ressorts en version douce sont disponibles sur demande
- ⊕ Compensation de la pression grâce à une déflexion indépendante et précise du ressort

Avantages pour le soignant :

- ⊕ Configuration individuelle du plan de couchage sans outils
- ⊕ Ventilation idéale et pas d'absorption d'humidité



Qualité : l'apparence des surfaces faciles à nettoyer et le design moderne créent une atmosphère chaleureuse - le choix de matériaux durables garantit une stabilité extrême

Configurable individuellement : 3 systèmes de barrières

SR1



- ⊕ Manipulation facile en toute douceur
- ⊕ Une grande flexibilité grâce à différentes longueurs
- ⊕ Rétrocompatible avec certains modèles de lits
- ⊕ Hauteur totale compacte
- ⊕ Haptique optimale
- ⊕ Design épuré et discret
- ⊕ Implémentation complète de la norme DIN EN 60601-2-52



SR2



- ⊕ Solution de base reconnue
- ⊕ Design épuré
- ⊕ Manipulation aisée grâce à un faible poids
- ⊕ Montage rapide sur le lit
- ⊕ Manipulation rapide, simple et intuitive
- ⊕ Implémentation complète de la norme DIN EN 60601-2-52



SR3



- ⊕ Nombreuses variantes et différents décors
- ⊕ Rallonge des barrières intégrée
- ⊕ Reconnu et éprouvé depuis des années
- ⊕ Barrières recouvertes de décor en bois pour une ambiance chaleureuse
- ⊕ En option verrouillable dans la position la plus basse
- ⊕ Implémentation complète de la norme DIN EN 60601-2-52



Accessoires

Pour un équipement individuel et adapté à la situation.

Potence



Potence avec poignée

Réf. 92228 A001



Poignée de préhension

Réf. sur demande

Éclairages



Lampe DEL modèle G

Connexion au boîtier de contrôle, à actionner par la télécommande du lit
Réf. 100.04164



Lampe DEL modèle E

Alimentation électrique externe et interrupteur à bascule
Réf. 207.00196



Veilleuse sous lit

Connexion au boîtier de contrôle, à actionner par la télécommande du lit
Réf. sur demande

Supports universels



Porte-sac de drainage

Support de sac de drainage
Réf. 890.02299



Porte-urinal

Porte-bouteille d'urine
Réf. 890.02298

Portes-sérum



Porte-sérum (non réglable)

Ref. 890.02301



Porte-sérum (réglable en hauteur)

Ref. 890.02302



Porte-sérum à fixer à la potence

Ref. 890.02300

Accessoires

Pour un équipement individuel et adapté à la situation.

Butoirs muraux



Butoir avec roulette
Longueur : 500 mm



Butoir avec tampon
Longueur : 500 mm

Kit de rallonge de lit



Ensemble composé de :
- Élément de rallonge pour le plan de couchage
- Deux pièces décoratives pour rallonger l'encadrement du lit
Réf. 404



Extension de matelas
Longueur : 200 mm
Réf. sur demande

Divers



Chariot de transport
Réf. 100.04161



Revêtement de roulettes en aluminium
Réf. sur demande



Télécommande éclairée
Réf. sur demande



Télécommande additionnelle
pour une utilisation plus facile des éclairages par le résident
Réf. sur demande



Tablette tactile d'infirmière
Réf. sur demande



Batterie rechargeable
Batterie rechargeable pour assurer la fonctionnalité, par exemple en cas de panne de courant
Réf. sur demande

Abaissement d'urgence mécanique du relève-buste
Réf. sur demande

Panneaux



Type I plus

- Montants périphériques en bois massif avec plaque décorative intérieure
- Fente de couette pratique



Type I plus, version basse

- Montants périphériques en bois massif avec plaque décorative intérieure
- En design chaleureux



Type V plus

- Plaque décorative galbée : bois massif
- Montants rectangulaires latérales : bois massif
- Poignée cintrée : acier thermolaqué



Type VII plus

- Montants périphériques en bois massif avec plaque décorative intérieure
- Fente de couette pratique
- Bordure à montants coniques



Type VIII plus

- Plaque décorative droit : bois
- Montants latéraux ronds : bois massif



Tiroir de literie

pour les panneaux de type I et V (seulement pour largeur de lit 90 cm)
Réf. sur demande

Décors

La variété de notre gamme et de nos styles offre une flexibilité incomparable aux lits médicalisés bock. En tant que fabricant expérimenté, nous vous proposons des produits de haute qualité qui combinent fonctionnalité et confort. Tout peut être réaménagé et transformé ultérieurement.

Tous les éléments peuvent être adaptés en conséquence. Les lits médicalisés bock peuvent également être équipés de fonctions supplémentaires et d'accessoires optionnels. Ainsi, vous restez toujours flexible et ouvert à tous les changements futurs.

Couleur de base



Hêtre étuvé

Couleurs bois



Merisier Havanna



Madison Walnut



Erable After Eight brun



Erable royale



Chêne Sonoma clair




Hêtre Dosse

Couleur spéciale



Blanc

Découvrez l'univers des
produits bock sur
www.bock.net

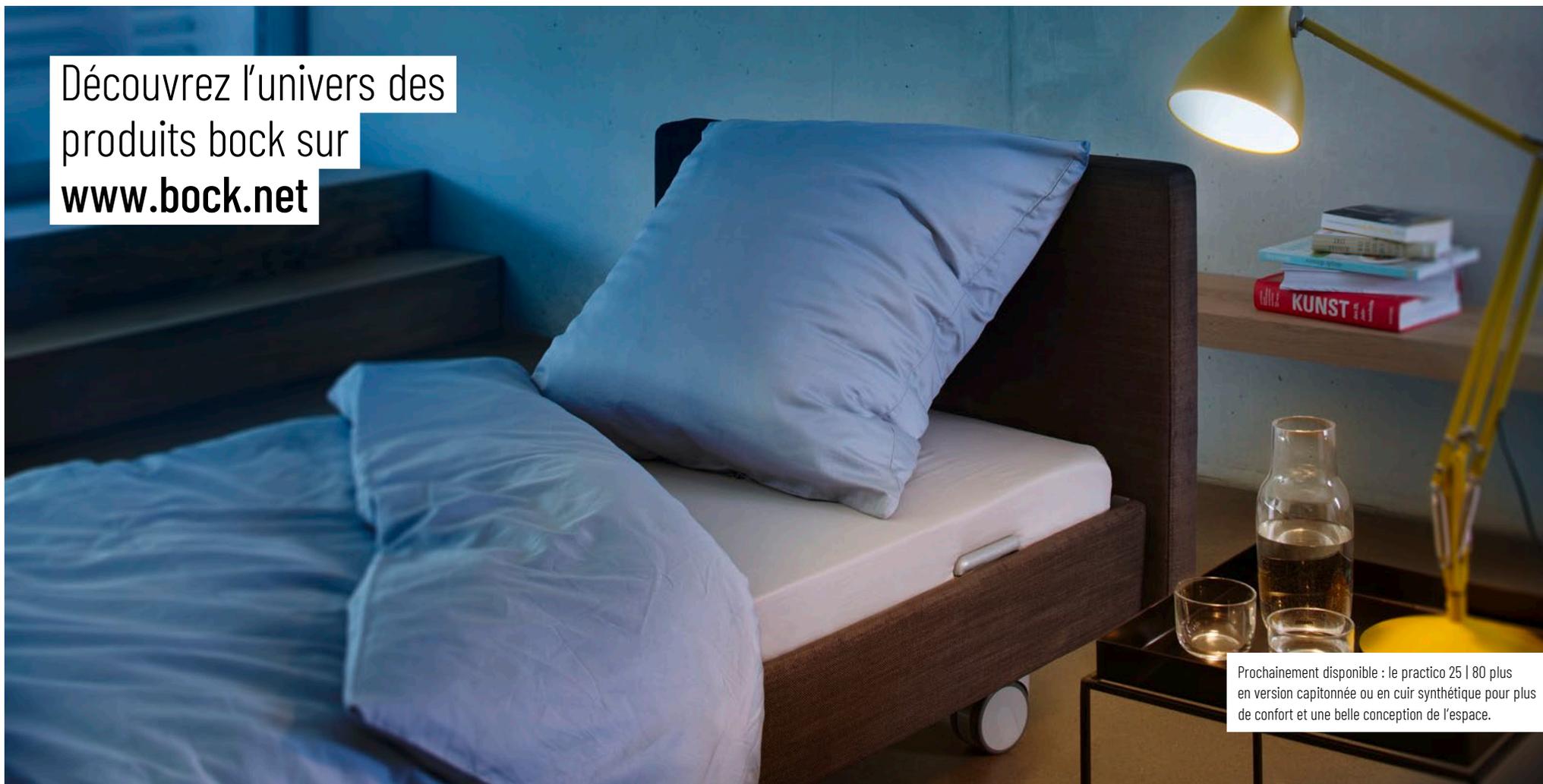

Prochainement disponible : le practico 25 | 80 plus
en version capitonnée ou en cuir synthétique pour plus
de confort et une belle conception de l'espace.

.bock[®]////

Marque déposée
Dernière actualisation : 12 | 2021
Sous réserve de modifications techniques
Crédit photo : Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Allemagne

Téléphone : + 49 (0) 5246 9205 0
Téléfax : + 49 (0) 5246 9205 25
Internet : www.bock.net
E-Mail : info@bock.net